


Gatan Digital Micrograph

Scriptのインストール方法

1. Scriptファイルを用意する

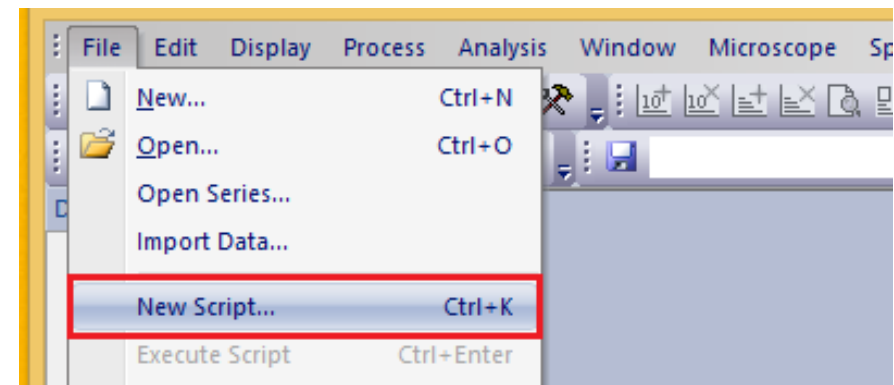


<試しに、コマンドを押すと「Hello World」を出力するScriptを準備する>

- 1) テキストエディタ もしくは Gatan Digital Micrograph(以後DM)を起動する。
- 2) (DMで新規Scriptを作る場合、)メニューバー[File]から[New Script...]をクリック(もしくは[Ctrl]+[K])

- 3) Scriptに以下を入力する。

result("¥nHello World")

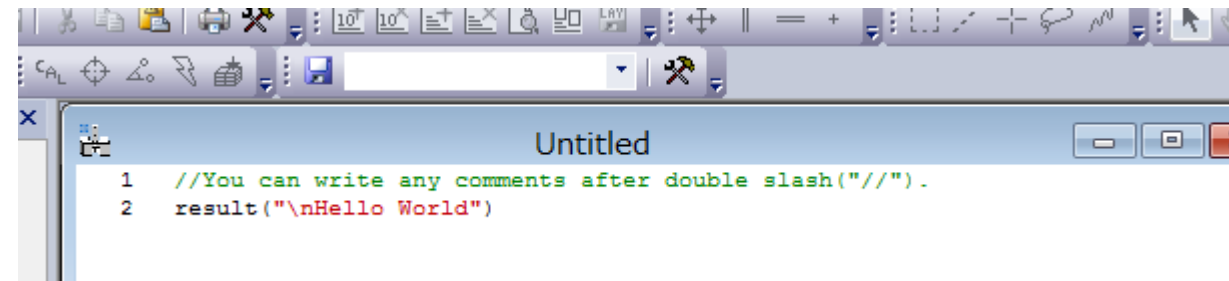

[補足]ダブルスラッシュ(//)の後にコメントを挿入することができる。

- 4) Scriptを保存する。拡張子は「.s」

(DMの場合 : Window左下の[Save As...]で保存)


2. Scriptのインストール

- 1) メニューバー[File]から[Install Script...]をクリック(.sファイルを読み込む場合は[Install Script File...]でファイルを選択)
- 2) 「Name of command?」にはコマンド名, 「Which menu?」には挿入したいメニュー名を入力。

今回は command:「say Hello」

menu: 「Test」

にインストール。

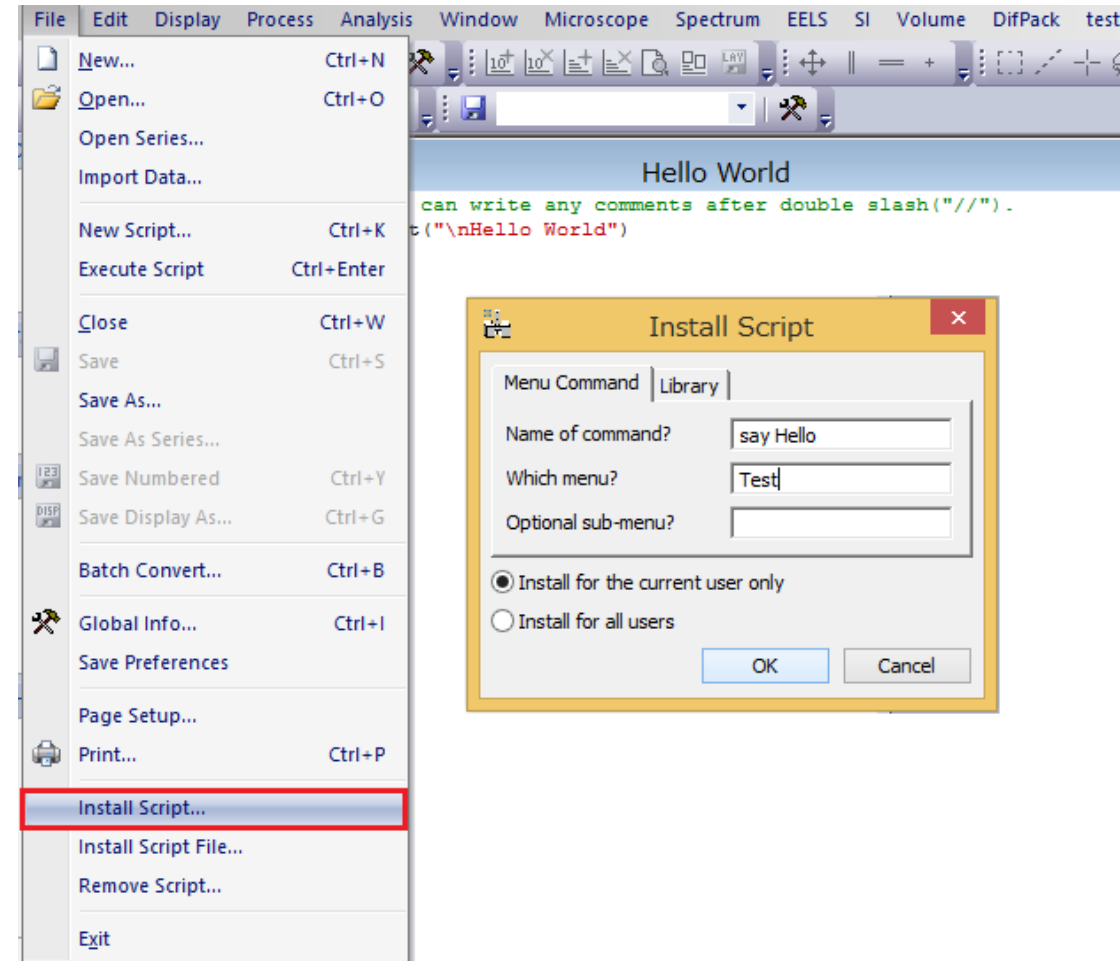

3. Scriptの実行


Menuバーに新たに加わった
コマンドをクリックし、Scriptを
実行。

今回の[Test]>[say Hello]をク
リックすると

下方[Output]のResultsには

Hello World

が出力されている。

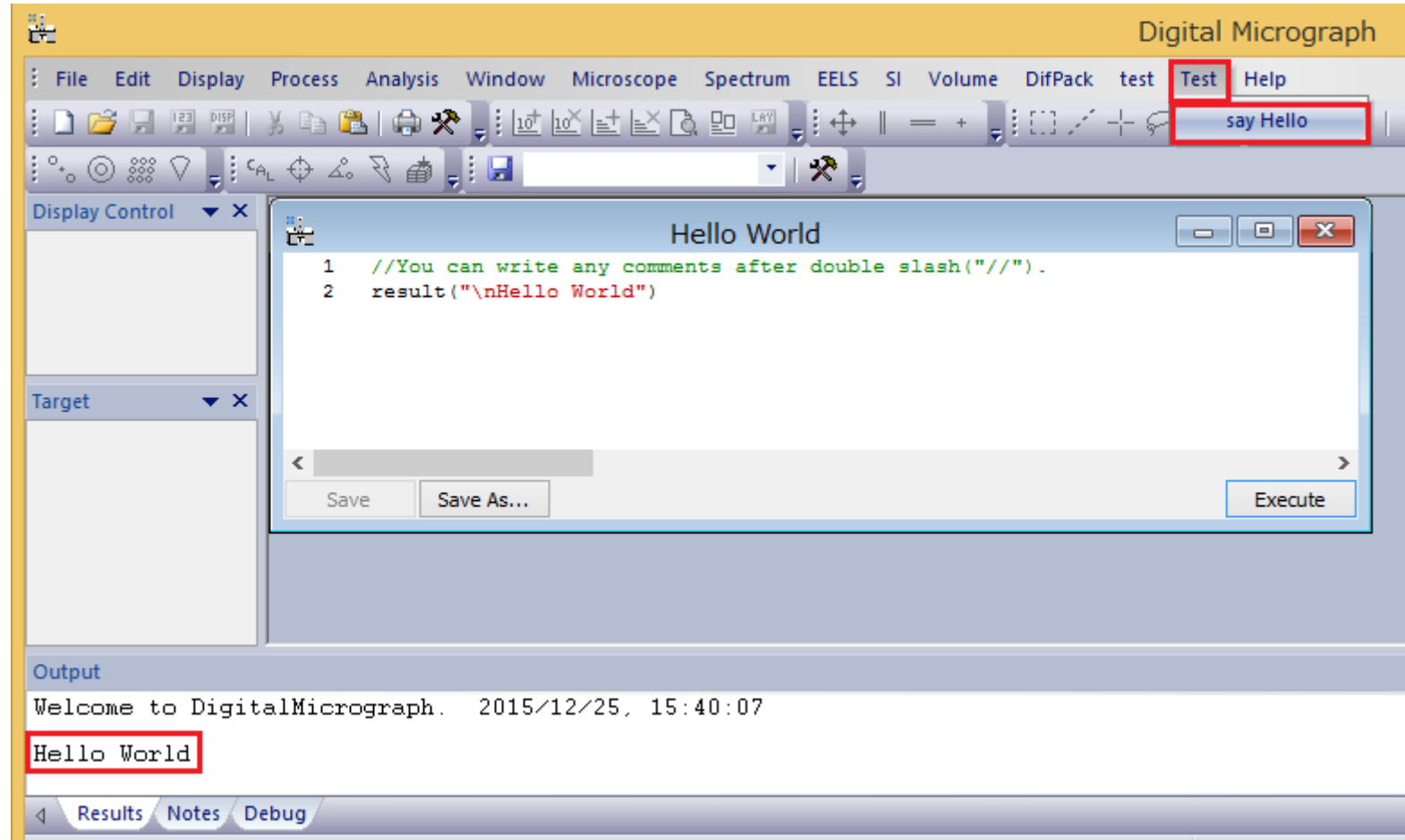

4. Scriptのアンインストール

- 1) [File]>[Remove Script...]をクリック。
- 2) 「Remove Script」のウィンドウで削除したいScript([say Hello])を選択
- 3) [Remove]を押すとコマンドが消える。

